



1. Tire todos os acessórios ao mesmo tempo de dentro da maleta. Ao fechar a maleta, certifique-se que nenhum fio está preso nas bordas. Só então inicie a montagem do equipamento.


2. **CINTA TORÁCICA:** Prenda uma das extremidades da cinta no equipamento e passe a outra ponta da cinta ao redor de seu tórax logo abaixo dos mamilos, prendendo a outra ponta em seguida. Deixe o equipamento posicionado no centro do tórax com a extremidade de metal voltada para cima. A luz amarela com o desenho correspondente à cinta vai aparecer e ficar piscando; aguarde até ficar verde (significa que está bem colocada). Caso não fique verde, ajuste novamente a cinta e cheque se as pontas estão bem encaixadas no equipamento. Esta cinta precisa estar justa, mas não apertada.

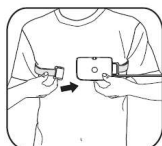

3. **CÂNULA NASAL:** conecte a extremidade da cânula no equipamento na ponta metálica no sentido horário. Coloque as hastes posicionadas dentro das narinas (precisam ficar dentro das narinas!). Passe a cânula atrás das orelhas e embaixo do queixo. Ajuste o controle deslizante até ficar confortável. Prenda a cânula nas bochechas com esparadrapo. Após algumas respirações, a luz amarela com o desenho correspondente à cânula nasal vai aparecer e ficar piscando; aguarde até ficar verde (significa que está bem colocada; caso não fique verde, ajuste novamente).

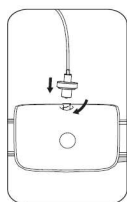

4. **SENSOR DE OXIMETRIA:** conecte a ponta preta do sensor de oximetria na ponta azul do equipamento, e em seguida, coloque a capa cinza protetora. Coloque o sensor no seu dedo indicador da mão não dominante; se ficar apertado coloque num dedo mais fino, deixando a saída do fio para cima sobre o dorso da mão. Prenda o fio com esparadrapo sobre o dorso da mão. Fixe a capa cinza na cinta torácica ou no pijama/camiseta. Após algumas respirações, a luz amarela com o desenho correspondente ao sensor de oximetria vai aparecer e ficar piscando; aguarde até ficar verde (significa que está bem colocado; caso não fique verde, ajuste novamente).

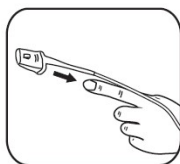

5. **VERIFICAÇÃO DE BOA CONEXÃO:** o Botão do Usuário permite verificar o status dos sensores a qualquer momento durante o ciclo do estudo. Para verificar os sensores, pressione e solte o Botão do Usuário uma única vez. Os ícones serão exibidos: verde sólido aparecerá se houver uma boa conexão; se ele estiver piscando amarelo, a conexão está solta ou ausente (faça ajuste no sensor indicado no visor).



6. **TÉRMINO DO EXAME:** Quando você acordar pela manhã, com cuidado, remova os sensores um de cada vez e depois o equipamento. Descarte a cânula nasal. Coloque o restante dos sensores e o dispositivo na maleta de transporte e devolva ao Hospital no período da manhã.